

Pump In Style® Battery Pack Instructions

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS

DANGER: To reduce the risk of electrocution:

1. Always unplug electrical products immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. Do not reach for a product if it has fallen into water. Unplug immediately.


WARNING: To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:

1. A product should never be left unattended when plugged into an electric outlet.
2. Close supervision is necessary when this product is used by, on or near children or invalids.
3. Use the product only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water.
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never use while sleeping or drowsy.
7. Do not use outdoors, or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
8. Only use the Medela® Pump In Style Battery Pack with the Medela Pump In Style breastpumps.
9. Always inspect power adaptor and battery pack wires prior to use for damage or exposed wire. If damage is found, immediately discontinue use of power adaptor or battery pack and call Medela Customer Service at 1-800-435-8316.

The Pump In Style Battery Pack

The Pump In Style Battery Pack is intended for use with Pump In Style breastpumps (manufactured in January 2008 and later) ONLY. Battery Pack uses 8 AA alkaline batteries, or, for more consistent pump performance, use rechargeable batteries. It is recommended that batteries be replaced or recharged between the 10th and 12th pumping session.

Battery Insertion

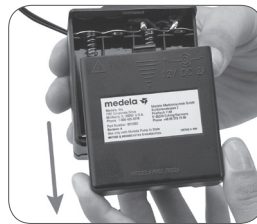

Replace all batteries at the same time.

Slide off both battery covers. Four (4) batteries must be on each side of battery pack.



Place the NEGATIVE (-) end of the battery against the front of the spring by pushing the battery in and down in one motion until the battery snaps into place.

The POSITIVE (+) end of the battery should be near the positive sign on the battery pack.



Replace battery cover.

- Remove the batteries if the Battery Pack is not going to be used for an extended period of time.

- If breastpump does not turn on, make sure the batteries have been inserted properly. If this does not solve the problem, contact Medela Customer Service at 1-800-435-8316.

- Each set of batteries will provide approximately 2 hours of pumping time.

Battery Removal

Slide off the battery covers. Insert a BLUNT, NON-METALLIC tool into the removal slot on either side of the Battery Pack. Gently pry the battery out. Replace the battery covers.

The Battery Pack was designed for safe use while stored in its pouch. The pouch fits inside the main bag or motor bag, along with the transformer.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

medela 

Medela, Inc., 1101 Corporate Drive, McHenry, IL 60050
Phone: (800) 435-8316 or (815) 363-1166 Fax: (815) 363-1246
Email: customer.service@medela.com www.medela.com

Medela and Pump In Style are registered trademarks of Medela Holding AG.

Printed in the USA 1907518 D 0613 ©2013 Medela, Inc.

Directives pour le bloc-pile Pump In Style®

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Il est recommandé de respecter certaines mesures de sécurité de base, incluant les mesures suivantes, au moment d'utiliser des appareils électriques, surtout si des enfants sont présents :

LIRE TOUTES LES DIRECTIVES

DANGER : pour réduire les risques d'électrocution :

1. Toujours débrancher les produits électriques après utilisation.
2. Ne pas utiliser dans le bain.
3. Ne pas placer ou ranger le produit à un endroit où il pourrait tomber ou être tiré dans le bain ou l'évier.
4. Ne pas le placer ou le laisser tomber dans l'eau ni aucun autre liquide.
5. Ne pas tenter de récupérer un produit qui est tombé dans l'eau. Débrancher immédiatement.

AVERTISSEMENT : pour réduire les risques de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :

1. Ne pas laisser un appareil électrique branché dans une prise sans surveillance.
2. Tenir une surveillance étroite lorsque ce produit est utilisé par ou près d'enfants ou d'handicapés.
3. Ne pas utiliser ce produit autrement que pour l'utilisation à laquelle il est destiné selon ces directives. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. Ne pas utiliser ce produit si son cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés ou si le produit ne fonctionne pas correctement, qu'il a été échappé, endommagé ou laissé tomber dans l'eau.
5. Tenir le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes.
6. Ne jamais utiliser en dormant ou si vous êtes somnolant.
7. Ne pas utiliser à l'extérieur ou près d'un endroit où des produits aérosols (vaporisateurs) ou de l'oxygène sont utilisés.
8. N'utiliser le bloc-pile Pump In Style Medela® qu'avec les tire-lait Pump In Style Medela.
9. Toujours vérifier l'état de l'adaptateur d'alimentation et des fils du bloc-pile avant de les utiliser pour s'assurer qu'il n'y a aucun dommage ni fil exposé. En cas de dommage, arrêter immédiatement l'utilisation de l'adaptateur d'alimentation ou du bloc-pile et communiquer avec le service à la clientèle de Medela au 1-800-435-8316.

Le bloc-pile Pump In Style

Le bloc-pile Pump In Style a été conçu pour utiliser avec les tire-lait Pump In Style (fabriqués en janvier 2008 ou après) UNIQUEMENT. Le bloc-pile accommode 8 piles AA alcalines et peut, pour une performance plus constante de la pompe, accommoder des piles rechargeables. Il est recommandé de remplacer ou de recharger les piles après 10 et 12 séances de pompage, respectivement.

Mise en place des piles



Remplacer toutes les piles à la fois.

Glisser les deux couvercles de compartiment à pile. Quatre (4) piles devraient se trouver de chaque côté du bloc-pile.

Placer la borne NÉGATIVE (-) de la pile contre le ressort en poussant la pile à l'intérieur et vers le bas d'un seul mouvement, jusqu'à ce que la pile s'insère à sa place.

La borne POSITIVE (+) de la pile devrait se trouver près du signe positif du bloc-pile.

Remettre le couvercle du compartiment à pile en place.

- Retirer les piles du bloc-pile lorsque ce dernier ne sera pas utilisé pendant un certain temps.

- Si la pompe tire-lait ne se met pas en marche, vérifier que les piles ont été correctement mises en place. Si cela ne résout pas le problème, communiquer avec le service à la clientèle de Medela au 1-800-435-8316.

- Chaque ensemble de piles permettra d'effectuer environ 2 heures de pompage.

Retrait des piles

Glisser les couvercles de compartiment à pile. Insérer un outil NON AFFUTÉ et NON MÉTALLIQUE dans la rainure de retrait de chaque côté du bloc-pile. Extraire doucement les piles. Remettre le couvercle du compartiment en place.

Le bloc-pile a été conçu afin d'être utilisé en toute sécurité alors qu'il est rangé dans sa pochette. Celle-ci se range facilement dans le sac principal ou le sac du moteur avec le transformateur.



CONSERVER CES DIRECTIVES

medela 

Medela, Inc., 1101 Corporate Drive, McHenry, IL 60050
Téléphone : 1-800-435-8316 ou +1 (815) 363-1166 Télécopieur : +1 (815) 363-1246
Courriel : customer.service@medela.com www.medela.com

Medela et Pump In Style sont des marques déposées de Medela Holdings AG.

Imprimé aux États-Unis 1907518 D 0613 ©2013 Medela, Inc.